

# Futura Plus

Cama de Hospital



## Cuando la fiabilidad y versatilidad son importantes – tanto ahora como en el futuro

Futura Plus es una cama clásica. En el transcurso de los años, Futura Plus ha enfrentado los retos de mejoras en la calidad de cuidados tanto para el paciente en cuanto al equipo sanitario. Futura Plus es una cama duradera, con ajustes múltiples, apta tanto para su uso en hospitales como en centros y residencias de rehabilitación.

Sus varias funciones fueron diseñadas para ser tan fáciles y ligeras de usar como posible. Las propiedades de calidad y el rendimiento ofrecido por Futura Plus han sido constantemente comprobados en el transcurso del tiempo. Su funcionalidad siempre ha cumplido con los estándares más exigentes.

Las camas de hospital Futura Plus ofrecen adaptabilidad y características múltiples con el fin de garantizar el confort del paciente. Futura Plus fue diseñada con varias propiedades para facilitar las tareas del equipo sanitario y para ofrecer posturas laborales ergonómicas. Una amplia gama de accesorios versátiles convierten a Futura Plus en una adquisición práctica.

- Una adquisición económica
- Construcción funcional
- Ajustes versátiles de uso fácil
- Una amplia gama de accesorios
- Fácil de limpiar



## Sus funciones prácticas y colores vivos vuelven a un día laboral sanitario en placer

Los ajustes eléctricos que ofrece Futura Plus facilitan el trabajo del equipo sanitario y garantizan un tratamiento salvo para el paciente. Los ajustes son activados con un control remoto. La operación de la cama es suave y silenciosa con el fin de garantizar el confort del paciente.

Alternativamente, ajustes mecánicos son disponibles también. En este caso, la altura de la cama se ajusta hidráulicamente con un pedal. Los ajustes manuales de la sección respaldo y Trendelenburg son ejecutados con la ayuda de palancas asistidas por muelles de gas. Todos los dispositivos para ajustes y el control remoto están dentro de un acceso fácil.

Las camas Futura Plus fueron diseñadas para una limpieza fácil. Su diseño atractivo y amplia gama de colores son acogedores para cualquier ambiente de tratamientos.



La palanca para los ajustes de la sección respaldo está dentro de un acceso fácil. La cama dispone de una palanca desmontable opcional para el control independiente del paciente.



La sección respaldo hidráulica, ajustable de acuerdo con el peso del paciente, facilita el levantamiento del paciente.



Ajuste hidráulico de la altura, un pedal por ambos lados de la cama.



Los ajustes con control eléctrico facilitan el trabajo del equipo sanitario e incrementan el confort del paciente.

# Futura Plus




- Tamaño especial para los niños
- Funciones fiables y versátiles
- Altura ajustable
- Construcción funcional
- Ajustes de uso fácil
- Amplia gama de accesorios
- Fácil de limpiar

Futura Plus Junior de Merivaara es una cama con diseño especial para los niños. La cama dispone de todas las características funcionales, versátiles y salvas de Futura Plus, solo las medidas de la cama fueron cambiadas para acomodar pacientes menores de una manera ideal. La cama Futura Plus Junior ofrece adaptabilidad y características múltiples con el fin de garantizar el confort del paciente, inclusive la altura de la cama es ajustable, ofreciendo seguridad y movilidad. Una amplia gama de accesorios versátiles convierten a Futura Plus Junior en una adquisición práctica




### Colchón

- Medi-Form visco-elástico 80 cm, cobertura higiénica 100000948
- Medi-Form visco-elástico 90 cm, cobertura higiénica 100000949
- Mediultra, cobertura higiénica, 80 cm 100000931
- Mediultra, cobertura higiénica, 90 cm 100000933
- Medi-Flex-Safe, cobertura higiénica, 80 cm 100000941
- Medi-Flex-Safe, cobertura higiénica, 90 cm 100000943
- Medi-Tricot, cobertura de tricot, 80cm 100000935
- Medi-Tricot, cobertura de tricot, 90cm 100000936
- Medi-Flex-Safe para el modelo Junior, cobertura higiénica, 100000908

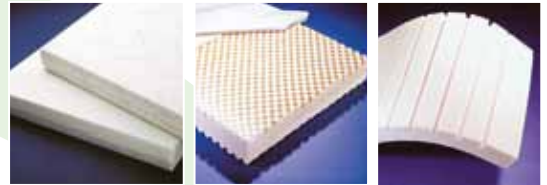

### Barandillas

- 1 sección, plegadizas, 100000754
- 1 sección, plegadizas para el modelo Junior, 100000756
- Modelo "Drop-down" SOLO para las camas con altura fija 100000750

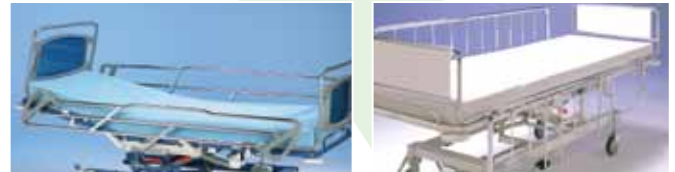

100000754, 100000750

100000750

### Cabeceras

- Cabecera ajustable Design montada por entubado en el bastidor. Con tubos de epoxy plateados o cromados. Colores: azul clara (RAL 5024), azul (RAL 5023), morado (RAL 4012), blanco (RAL 9002), verde pálido (RAL 6021), rojo (RAL 3020), amarillo (RAL 1003), beige (RAL 1015), haya 80 cm 100 009 880, 90 cm 100 009 980
- Cabecera ajustable Tubos cromados, tablero de lamina (colores: blanco, aliso blanco o haya) 80 cm 1000 07170, 90 cm 1000 07270
- Cabecera de acero, acero tubular formado para ajuste de dispositivos ortopédicos 80 cm 10000 0707, 90 cm 10000 0726



100 009 880, 100 009 980

1000 07170, 1000 07270

10000 0707, 10000 0726

### Base de colchón

- 2 o 3 secciones, ancho 80 cm o 90 cm
- Modelo Junior, 2 o 3 secciones, ancho 80 cm



Opciones de colores para las cabeceras

### Colores para Base de colchón/Bastidor:

- azul clara (RAL 5024)
- azul (RAL 5023)
- morado (RAL 4012)
- blanco (RAL 9002)
- verde pálido (RAL 6021)
- rojo (RAL 3020)
- amarillo (RAL 1003)
- beige (RAL 1015)
- plateado (RAL 9006)
- plateado anti-bacterial (RAL 9006)
- cromado



Base de colchón con lámina metálica

Base de colchón con red metálica

### Láminas de cobertura para la base de colchón

- Lámina metálica
- Red metálica
- Lámina metálica, 3 secciones, Rayos X

### Tabla de extensión

Alarga la cama ~ 200 mm, ajuste para el bastidor tubular de la cabecera desmontable.

- 80 cm 100 000 718 (cabecera 10007170)
- 90 cm 100 000 728 (cabecera 10007270)
- 80 cm ABS, 100 009 718 (cabecera Design 100009880)
- 90 cm ABS, 100 009 728 (cabecera Design 100009980)



Tabla de extensión



Ruedas Design 125 mm /150 mm, Ruedas PJP 125 mm/150 mm

### Ruedas


- 125 mm PJP & Design
- 150 mm PJP & Design
- Extra pedal para el bloqueo de las ruedas opcional
- 5a rueda opcional



5a rueda opcional



Extra pedal para el bloqueo de las ruedas opcional

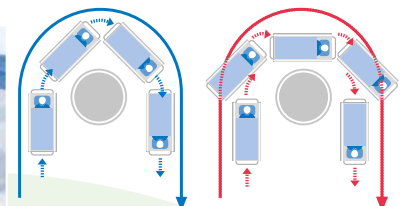

A la izquierda se demuestra como la cama hace curva con la 5a rueda – a la derecha lo mismo sin la asistencia de la 5a rueda opcional.

# Futura Plus

## Cestillos

- Cestillo para las revistas 128009784
- Cestillo para las pertinencias para camas hidráulicas 90 cm 128009782
- Cestillos para las pertinencias para camas eléctricas 90 cm 128009783



128009784



128009782, 128009783

## Bandejas

- Bandeja para el monitor/revistas, ajuste fácil a la cabecera, afuera o dentro de la cama 128009768
- Bandeja para las pertinencias, desliza dentro/afuera, desmontable para su limpieza 10000 0762
- Bandeja de madera (ajuste con las barandillas) para camas de 80 cm 100004680



128009768



10000 0762



100004680

## Porta sueros

Ajuste con liberación rápida, ajustes por todos los cantos de la cama, altura ajustable.

- 2 ganchos 100005780
- 4 ganchos 100000499
- Modelo ajustable 10000 0708
- Sostén para la bolsa de infusión 100000713



10000 0772



10000 0770



100005780



100000499



10000 0708

## Barras de levantamiento

La manija se mantiene con acceso fácil para el paciente en todas las posiciones del respaldo. Fácil de ajustar y desmontar, el tubo se desmonta separadamente.

- 10000 0770 con un triangle standard
- 10000 0772 con triangle "rollup"
- 100000776 barra de levantamiento para el modelo Junior



10000 0772



10000 0770



100005780



100000499



10000 0708

## Asa de soporte

- Asa de soporte desmontable ajustable en tres posiciones alternativas (incl. partes de fijación) 100007755

## Sostenes

- Canastilla para la botella de orina 128009790
- Sostén para la bolsa de orina 100000799



100000713



10000 7755



128009790



100000799

## Componentes eléctricos

- Panel de control para la enfermera TLB A41987800
- Batería con sus sostén A41956300



A41956300



A41987800

## Otros accesorios


- Palanca para los ajustes de la sección respaldo 100000782
- Sostén para control remoto 100043973
- Escalón para las camas con altura fija 10000 0760
- Lámpara 12 V/10W 100000498
- Soporte de colchón A41986900
- Sostén para presilla 100000798
- Gancho para cable de alimentación A41987307
- Soporte para bala de oxígeno A41897900



100000782



100043973

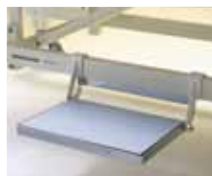

10000 0760



100000498



A41986900



10000 0798



A41987307




A41897900




Los ajustes sin escala Trendelenburg y anti-Trendelenburg asistidos por muelles de gas ofrecen un amplio rango de ángulos.


### Camas con 2 secciones

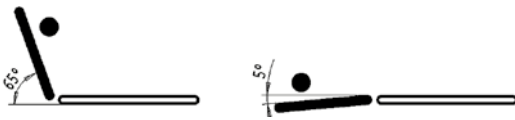

### Camas con 3 secciones

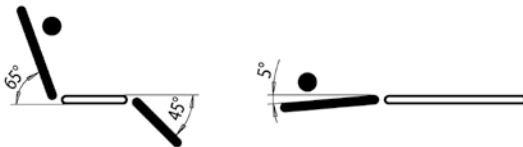

### Camas con 2 y 3 secciones con respaldo neumático

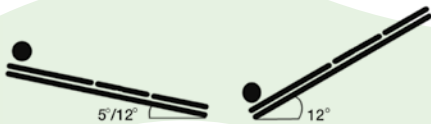

### Trendelenburg, anti-Trendelenburg

### Especificaciones Técnicas

- bastidor de la base de acero con revestimiento de epoxy o cromado
- bastidor mediano de acero con revestimiento de epoxy
- base de colchón 2 o 3 secciones; tubos de bastidor de acero con revestimiento de epoxy o cromados
- láminas de la base de colchón de acero con revestimiento de epoxy
- ruedas Ø 125 o 150 mm, rodamientos especiales, con sistema de bloqueo central

### Dimensiones

- largo 2135 mm
- ancho 845 o 945 mm
- altura 600 mm (modelo con altura fija)
- tamaño recomendado de colchón 750 x 2000 mm o 850 x 2000 mm
- peso aprox. 90 kg sin accesorios
- peso máximo del paciente 225 kg

### Dimensiones de Futura Plus Junior

- largo 1735 mm
- ancho 845 mm
- altura 575 mm (modelo con altura fija)
- tamaño recomendado de colchón 740 x 1600 mm o 750 x 1600 mm
- peso aprox. 90 kg sin accesorios
- peso máximo del paciente 225 kg

### Ajustes

- ajustes de altura hidráulicos  
rango de ajustes 415 – 810 mm, 415 – 795 mm para el modelo Junior  
un pedal para ajustes por ambos lados de la cama  
ajuste de altura eléctrica con control remoto  
rango de ajustes 440 – 830 mm
- ajustes de la sección respaldo eléctricos o manuales asistidos por muelles de gas
- Trendelenburg (-12°) y anti-Trendelenburg (+5°) modelos eléctricos, (+12°) modelos hidráulicos, ajustes manuales asistidos por muelles de gas
- ajustes de la sección piernas eléctricos o manuales asistidos por muelles de gas

3 años de garantía





**MERIVAARA**

**Merivaara Corp.**

Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLANDIA

Tel. +358 3 3394 6111, fax +358 3 3394 6144

[merivaara@merivaara.fi](mailto:merivaara@merivaara.fi)

[www.merivaara.com](http://www.merivaara.com)