

Optima

Cama de partos





Merivaara fabrica todo el mobiliario esencial para los hospitales modernos de actualidad. Todos los productos de Merivaara vienen con su certificación CE y tienen un certificado ISO.

Merivaara es bien conocido mundialmente por sus productos de alta calidad, utilidad práctica, modularidad de sus productos y diseño moderno escandinavo. Merivaara es entre las pocas empresas en el mundo que fabrican y cubren la gama entera de mobiliario para hospitales. Los productos de Merivaara se venden en más de 60 países mundialmente.



Merivaara provee todo el mobiliario esencial para las salas de partos. Sus productos son completamente modulares y pueden ser adaptados según las necesidades individuales. El aspecto ergonómico fue un detalle de enfoque especial cuando el concepto fue creado.



Optima

- Posición sentada
- Soportes de pies anchos y confortables y asas estables para un agarre firme
- Ergonomía sobresaliente ofreciendo una buena posición para propulsión
- Abre la pelvis de una manera más ancha facilitando el camino del bebé en el curso de nacimiento



- Posición lateral
- Un rango amplio para los ajustes
- Cierre justo y ergonómico
- Mas ergonomía y confort para las madres
- Fácil relajamiento entre la partera y la madre
- Minimiza la presión de peso de la madre sobre el bebé y de sangre a útero y al bebé



- Posición sentada
- Abre la pelvis de una manera más ancha facilitando el camino del bebé en el curso de nacimiento
- La gravedad facilita un parto más cómodo
- Un rango amplio para los ajustes de las perneras garantizan
 - un parto más rápido
 - más ergonomía para la partera

- La cama de partos Optima permite el parto en una sola unidad
- La partera tiene un acceso fácil a las posiciones de parto
- Movimiento automático y articulado del asiento y respaldo
- Trendelenburg tanto eléctrico como manual



ajustes de las perneras
de las abrazaderas
para diferentes tamaños

as sesiones de propulsión
erineo y maximiza el flujo
bé

mite múltiples posiciones para

para asistir en todas las

ado para las secciones de

como vía liberación rápida



- Posición arrodillada
- Amplias posibilidades para ajustar las secciones de asiento y respaldo
- La sección de apoya-piernas con desplazamiento longitudinal se puede guardar dentro de la cama, ofreciendo mucho espacio alrededor del paciente y la cama de partos
- Posición de pelvis confortables y de acomodación fácil
- Reduce la presión de diafragma y mejora el fluido de sangre a los músculos de contracción



- Posición parada con una barra laboral (SQUAT)
- la gravedad facilita un parto mas cómodo
- Facilita una abertura más amplia pélvica
- Relajamiento del área pélvica facilita un parto más cómodo para la madre
- Permite también una pre-posición para el parto con una bola gimnástica

Optima



Soportes para los pies (incluidos)



Par de perneras (sistema rótula) 100033957



Barandillas (en 2 secciones) A42200100 (requiere: puntos de fijación de accesorios en la sección respaldo A41980200)



Cestillo para el juego de colchones 100033974
Juego de colchones A42195800



Hastial de cama plegable A41935200



Hastial de cama "Diseño" 100009890



Colores opcionales para el base de colchón
Morado (RAL 4012) amarilla (RAL 1003) verde claro (RAL 6021), rojo (RAL 3020), azul (RAL 5023), blanco (RAL 9002), azul claro (RAL 5024), beige (RAL 1015), plata (RAL 9006)

Colores opcionales para las barandillas y hastiales de la cama: Morado (RAL 4012) amarillo (RAL 1003) verde claro (RAL 6021), rojo (RAL 3020), azul (RAL 5023), blanco (RAL 9002), azul claro (RAL 5024), beige (RAL 1015)




Soporte de brazo 100000127




Barra laboral (SQUAT) A42151700



Barra de infusión
2 ganchos 100005780
4 ganchos 100000499

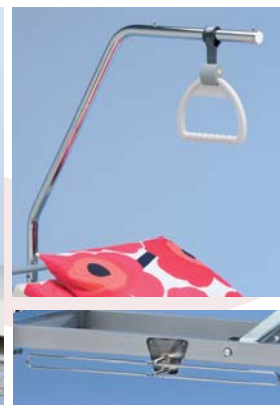

Barra de levantamiento A41884100
Sostén para la bolsa de excrementos A41916000

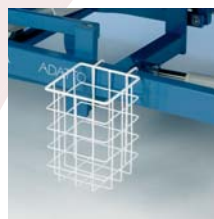

Sostén para la botella de orina 128009790



Cestillo para las revistas 128009784



Bandeja para el monitor 128009768



Nivel de burbuja A42068000



Gancho para cable eléctrico A41987307



Raíl para los accesorios 100000701 (requiere: puntos de fijación de accesorios en la sección respaldo A41980200)

Base de colchón	3-seccional, acero recubierto de epoxy
Peso	125 kg
Peso máximo del paciente	2230 kg, 150 kg para las perneras
Largo	1750 - 2310 mm
Ancho	1030 mm
Altura	600 - 970 mm
Colchón	Material de la cobertura: revestimiento PU, higiénico, duradero
Ajustes	Sección de respaldo: (70°) eléctrico y con mecanismo para una liberación rápida <ul style="list-style-type: none"> • Altura apoya-piernas: eléctrico • Inclinación apoya-piernas: (30°) neumática • Trendelenburg: (17°) eléctrico y con mecanismo para una liberación rápida
Ruedas	Ø 125 mm, con sistema de bloqueo central Ø 150mm ruedas "diseño", sistema de bloqueo central
Equipamiento standard	bastidor superior con capa de epoxy, gris claro <ul style="list-style-type: none"> • ajustes eléctricos de la altura del base, respaldo, Trendelenburg y la altura de apoya-piernas • un mecanismo separado para una liberación rápida para Trendelenburg y respaldo • un sistema central para el bloqueo de las ruedas • ajustes para las perneras • perneras, 2 pcs • cuenco de acero inoxidable
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> • juego de colchones • perneras (sistema rótula) • barandillas, varias opciones de colores • hastial de cama, varias opciones de colores • barra de levantamiento • barra de infusión • barra laboral (SQUAT) • cestillo para el juego de colchones • bandeja para el monitor • nivel de burbuja • raíl para los accesorios • soporte de brazo
Calidad	La cama de partos Optima cumple con las ultimas directivas y estándares para aparatos médicos: <ul style="list-style-type: none"> - IEC/EN 60601-1-2 (EMC), IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-2-52 - Las camas de parto Optima cuentan con su certificación CE - Las camas de parto Optima son diseñados, fabricados y entregados de acuerdo con los estándares de calidad Quality Management System ISO 9001:2000 + ISO 13485:2003, el sistema de gestión ambiental Environmental Management System de Merivaara es certificado de acuerdo con el estándar ISO 14001:2004.
Garantía	3 años



MERIVAARA

Merivaara Corp.

Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND
Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.fi
www.merivaara.com